

点滴杆电源插座

点滴ポール電源コンセント

NEW LE-550

特 点

- 点滴ポールに固定できる電源コンセント。
- コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合品を使用
- 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを差すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
- 可固定在点滴杆上的电源插座。
- 电源插座与插头使用医用JIS T 1021适用品
- 插入口放低，从斜下方指插头，液体流入不易造成短路。

- 仕 様
- 材 質：本体／ポリカーボネート（PC/ABS）
 - プラグ仕様：医用接地プラグ〔JIS T 1021適合品〕
 - 差 込 口：医用接地コンセント4個口（2×2）〔JIS T 1021適合品〕
 - 定格容量：15A・125V（合計1500Wまで）
 - 対応点滴ポール径：φ25.0mm～φ27.0mm
 - 組立式（要工具：プラスドライバー）
 - 付 属 品：なべねじM4×10 8本、パイプバックキン、パイプバンド2個

- 用 途
- 点滴ポール
- 納 期
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備 考
- 屋外では使用はしないでください。
 - コードフックとコンセントキャップ（T-CAP2）は別売です。

- 規 格
- 材 質：本体／聚碳酸酯（PC/ABS）
 - 插头规格：医用接地插头〔JIS T 1021适用品〕
 - 插 入 口：医用接地插座4个口（2×2）〔JIS T 1021适用品〕
 - 额定容量：15A、125V（合計1500W为止）
 - 对应点滴杆口径：φ25.0mm～φ27.0mm
 - 组装机（需工具：十字螺丝刀）
 - 附 件：盘头螺丝M4×10 8个、管垫圈、管夹带2个

- 用 途
- 点滴杆
- 交 貨 期
- 常规产品・・・敬请垂询
- 備 注
- 请勿在室外使用。
 - 接线钩与插座盖（T-CAP2）另售。

通电すると
光ります
通电后点亮

LE-550-3-White-Pink



LE-550-5-White-Blue

LE-550-5-Red-White

LE-550-CF

T-CAP2

还有防止恶意为
的T-CAP2。
敬请垂询。

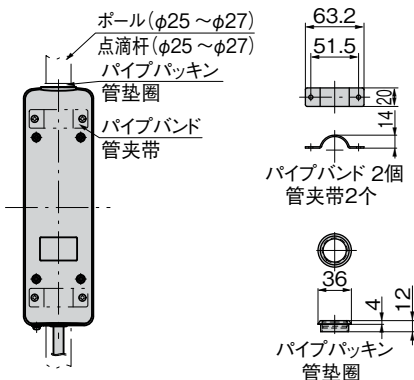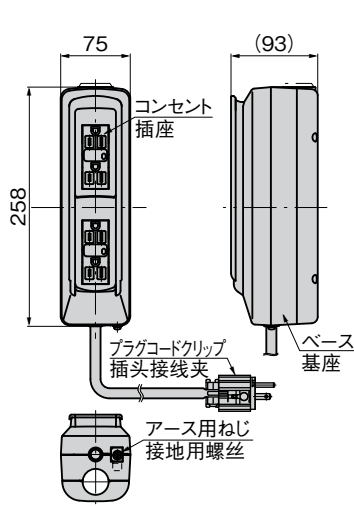

取付け方法
安装方法

ドライバーのみで取付け
られます。
仅可用螺丝刀安装。

使用例
使用例

商品番号 商品编号	RoHS CAD	備 考 備 注	コード長さ(m) 接线长度(m)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
LE-550-3-White-Pink		本体 本体	3	1,400	50374
LE-550-5-White-Blue		本体 本体	5	1,730	50375
LE-550-5-Red-White		本体 非常電源用 本体 紧急电源用	5	1,730	50376
LE-550-CF		コードフック 接线钩		155	50377

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。

